



3 B : INSTRUCTIONS POUR L'ANALYSE DE FROT-TIS DE L'ANUS / DU RECTUM

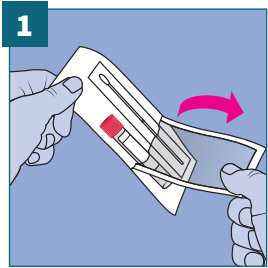


1 Dans l'emballage se trouvent
* un écouvillon
* un flacon avec liquide de transport

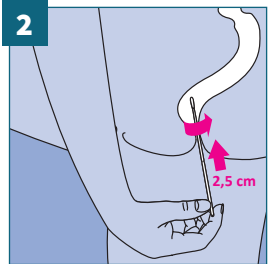


2 Introduisez ensuite l'écouvillon dans l'anus sur environ 2,5 cm.


Frottez l'écouvillon pendant 5 à 10 secondes contre l'intérieur de l'anus (rectum).

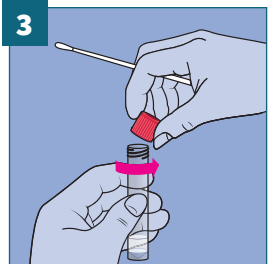


3 Ouvrez le flacon contenant le liquide et tenez-le bien droit.

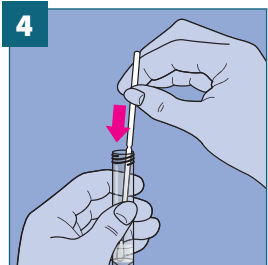


4 Après avoir fait le frottis, introduisez l'écouvillon jusqu'au fond du flacon.

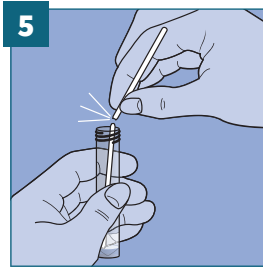

5 Coupez la partie supérieure de l'écouvillon au niveau du point de rupture coloré.

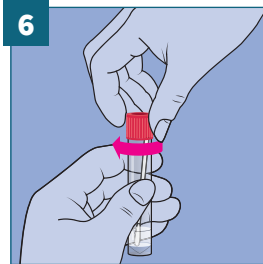


6 Revissez le bouchon en serrant bien.

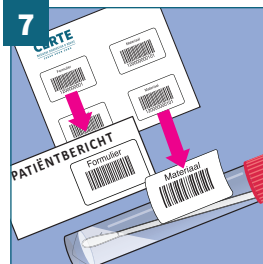


7 Collez l'étiquette 'formulier' sur la notice patient et l'étiquette 'materiaal' sur le flacon. Veillez à coller l'étiquette sur le flacon avec le code barres dans le sens de la longueur.

Écrivez la date du prélèvement sur la notice pour patient.


PRÉPARATION POUR L'ENVOI

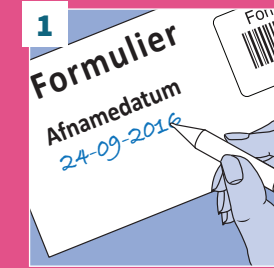


1 N'oubliez pas de remplir la date du prélèvement.

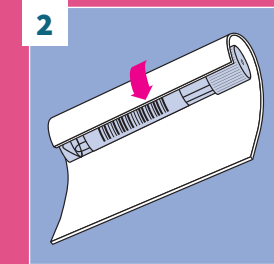

2 Entourez le flacon avec la feuille absorbante.

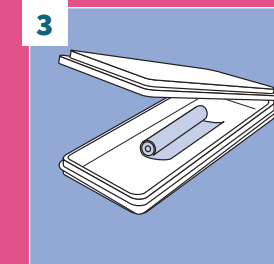

3 Placez-le dans l'emballage blister.

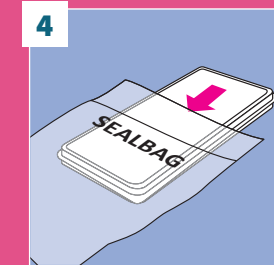

4 Mettez le blister dans le sachet étanche et refermez celui-ci.

Sur la face non imprimée du sachet étanche se trouve une poche supplémentaire, mettez-y le bon de commande.

Votre médecin de famille vous informe sur la remise du matériel.