




5: INSTRUCTIES MRSA KWEEK AFNEMEN

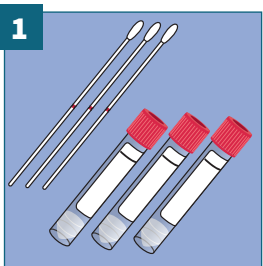


1 In de verpakking zitten drie setjes wattenstokjes en drie buisjes met transportvloeistof.

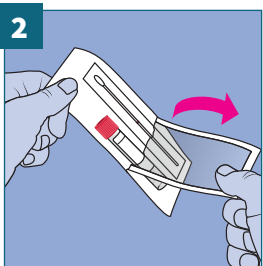


2 Open de verpakking en haal het wattenstokje en de buis eruit.

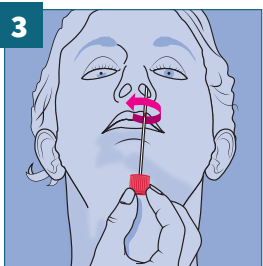

3 Neem een neuskweek af door met het wattenstokje stevig langs de binnenzijde van beide neusvleugels te strijken.

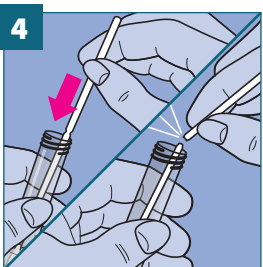


4 Open de buis en doe het wattenstokje er in. Breek het wattenstok af op het gekleurde breekpunt. Draai de dop stevig vast.

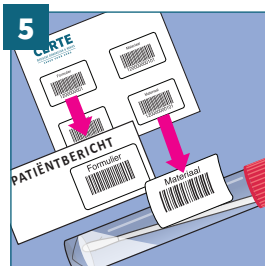


5 Schrijf op het etiket op welke plek van het lichaam de kweek is afgenomen en de afnamedatum.

Plak de sticker 'formulier' op het patiëntbericht en de sticker 'materiaal' op het buisje. Zorg dat de sticker met de barcode in de lengterichting op het buisje wordt geplakt. Schrijf de afnamedatum op het patiëntbericht.

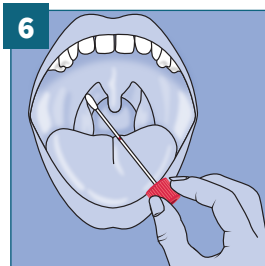


6 Neem een keelkweek af door met een nieuwe wattenstok achterin de keel te strijken.

Vervolg met stap 4 en 5.

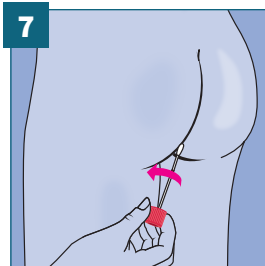


7 Neem de perineumkweek af door een nieuwe wattenstok over de huid tussen de anus en de genitaliën te strijken. Vervolg met stap 4 en 5.


KLAARMAKEN VOOR VERZENDING

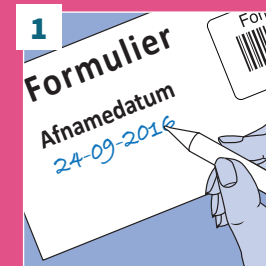


1 Vergeet niet de afnamedatum in te vullen op elk formulier (drie stuks).

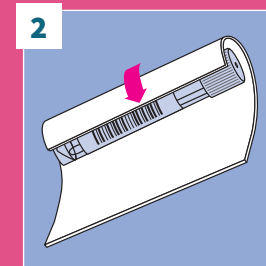

2 Omwikkel de buisjes met het absorberende inlegvel.

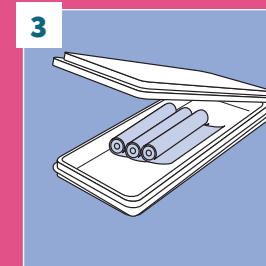

3 Stop deze 3 buisjes in de blister.

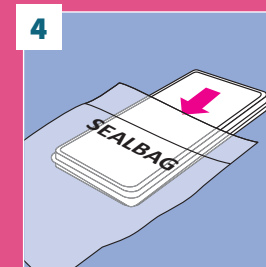

4 Stop de blister in de sealbag en plak deze dicht.

Aan de onbedrukte zijde van de sealbag zit een extra vakje, doe hier het aanvraagformulier in.

Uw huisarts geeft u informatie over het inleveren van het materiaal.