



3B: INSTRUCTIES ONDERZOEK ANUS/ RECTUM-UITSTRIJK

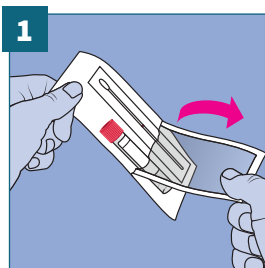

1


In de verpakking zit een
• wattenstokje
• buisje met transportvloeistof

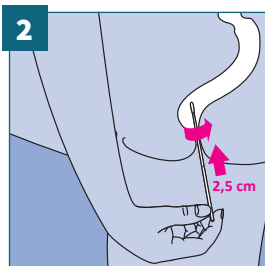

2


Breng het wattenstokje vervolgens
ongeveer 2,5 cm diep in de anus.

Wrijf de stok 5 -10 seconden tegen
de binnenkant van de anus (rectum).

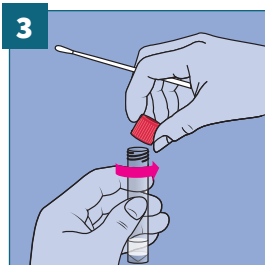


3

Open het buisje met transportvloeistof
en houdt het rechtop.

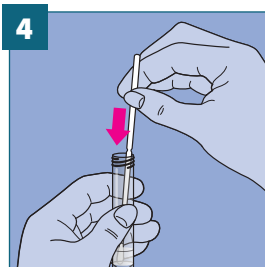


4

Breng na het maken van de uitstrijk
het wattenstokje tot op de bodem
van het transportbuisje.

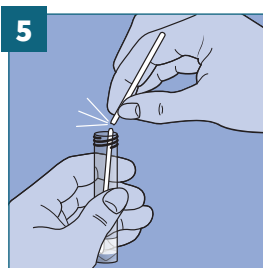


5

Breek bovenkant bij het gekleurde
breekpunt van het stokje af.

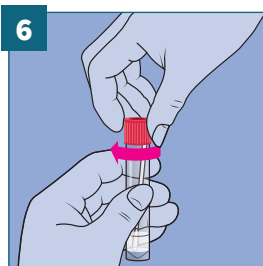

6


Draai de dop stevig vast.

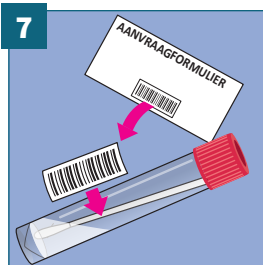

7


Plak de sticker met de barcode in de
lengterichting op het buisje. Schrijf de
afnamedatum op het aanvraagformulier.

KLAARMAKEN VOOR VERZENDING

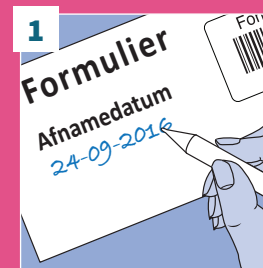


1

Vergeet niet de afnamedatum in te vullen.

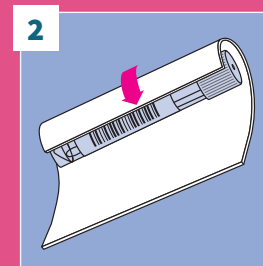


2

Omwikkel het buisje met het
absorberende inlegvel.

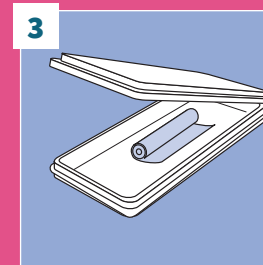

3

Stop dit in de blister.

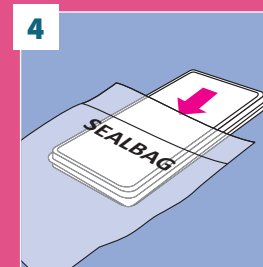

4

Stop de blister in de sealbag en
plak deze dicht.

Aan de onbedrukte zijde van de sealbag
zit een extra vakje, doe hier het aanvraag-
formulier in.

Uw huisarts geeft u informatie over het
inleveren van het materiaal.